

产品手册

H_αvβ6 HEK-293 Cell Line

H_αvβ6 HEK-293 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.11.1

目录

一、	产品基本信息及组分.....	3
二、	包装、运输及储存.....	3
三、	材料准备.....	3
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备.....	3
2.	试剂耗材准备.....	3
四、	细胞培养、复苏、冻存.....	4
1.	细胞复苏.....	4
2.	细胞传代（以 10 cm 皿为例）.....	4
3.	细胞冻存.....	4
五、	验证结果.....	5
1.	流式检测蛋白表达.....	5
附录 1:	流式验证结果.....	6
附录 2	H_ITGAV 氨基酸序列(NP_002201.2).....	6
附录 3	H_ITGB6 氨基酸序列(P18564-1).....	7
相关产品.....		8
使用许可协议:		8

一、产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C19431	H_αvβ6 HEK-293 Cell Line	5E6 Cells/mL

组成成分

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C19431	H_αvβ6 HEK-293 Cell Line	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关实验，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	DMEM+10% FBS+1% P.S
细胞生长培养基:	DMEM+10% FBS+1% P.S+150 μg/mL Bleomycin+125 μg/mL Hygromycin
细胞冻存液:	90% FBS+10% DMSO

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
Hygromycin	1 g	Genomeditech/GM-040403-1
Bleomycin	100 mg	Genomeditech/GM-040407-100MG
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Fetal Bovine Serum	500 mL	Cegrogen biotech/A0500-3010
DMEM	500 mL	gibco/C11995500BT
Anti-αvβ6 hIgG1 Antibody(m15H3)	/	Genomeditech/GM-53193AB
Anti-αV hIgG2 Antibody	/	Genomeditech/GM-49298AB
Anti-ITGB6-MMAE ADC(Dar4)[SGN-B6A]	/	Genomeditech/GM-81150AB

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
-----------	----------------------------

细胞计数仪

ThermoFisher Scientific/Countess 3

流式细胞仪

常州必达科生物科技有限公司/BeamCyte-1026

四、细胞培养、复苏、冻存

1. 细胞复苏

注：为确保最高存活率，应在收到冻存细胞后立即解冻并复苏培养。如果在收到细胞后需要继续储存，将其置于液氮罐中，严禁储存在 -70°C ，因为在 -70°C 下储存会导致活性丧失。

- 37 $^{\circ}\text{C}$ 水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 70% 乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀，176 \times g，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加复苏培养基的形式，调整活细胞密度到 $2-3 \times 10^5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

3. 细胞冻存

- 使用 176 \times g，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中， -80°C 下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代（以 10 cm 皿为例）

注：细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为上皮细胞，贴壁生长。培养箱中孵育 16-24 h 后，镜下观察细胞贴壁情况，当细胞密度达到 80%，需要进行细胞传代。推荐细胞传代比例为 1:3-1:4，2-3 天传代。注意保持密度不超过 80%，否则可能会因细胞受到挤压而导致活性减弱。
- 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37 $^{\circ}\text{C}$ 消化 30-60 s，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右生长培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来，176 \times g 室温离心 3 min。

注意事项：

- 细胞刚复苏，死细胞较多，属于正常现象，经调整会有明显好转，状态稳定后，传代后死细胞会变少，细胞生长速度趋于稳定。
- 注意保持密度不超过 80%，否则可能会因细胞受到挤压而导致活性减弱。

五、 验证结果

1. 流式检测蛋白表达

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐H_αβ6 HEK-293 Cell Line细胞量为 2×10^5 cells/管。操作步骤如下：

- 实验前，需等待细胞生长速率稳定，约需要7-10 d。
- 实验当天，消化H_αβ6 HEK-293 cell line，取100 μL细胞悬液（细胞计数后用PBS调整浓度为 2×10^6 cells/mL），加入适量的表面抗体（Anti-αβ6 hIgG1 Antibody(m15H3)），4°C避光孵育1 h。
- 加入1-2 mL PBS冲洗，重复此步骤。
- 加入荧光标记的二抗，4°C避光孵育30 min。
- 1000 rpm离心5 min，去除上清，用300 μL PBS重悬。
- 立即上机检测。
- 验证结果。

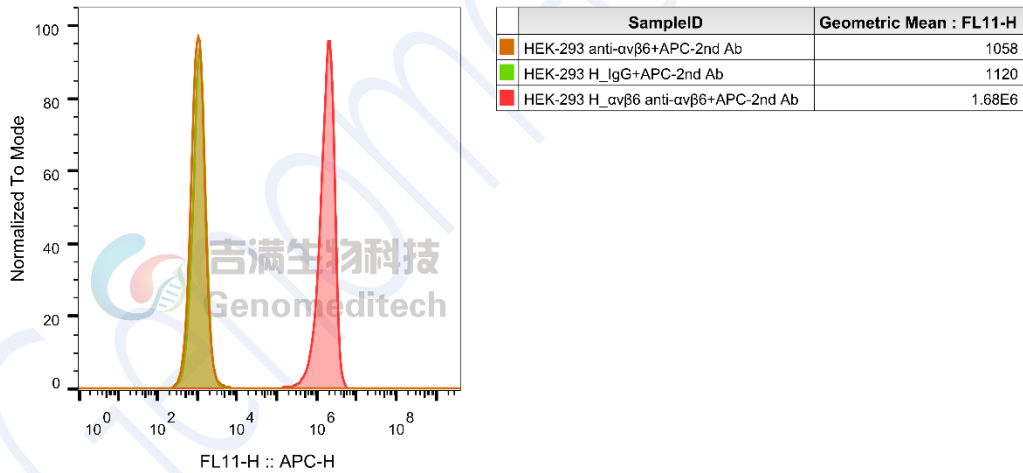


Fig 1.流式验证结果

附录 1: 流式验证结果

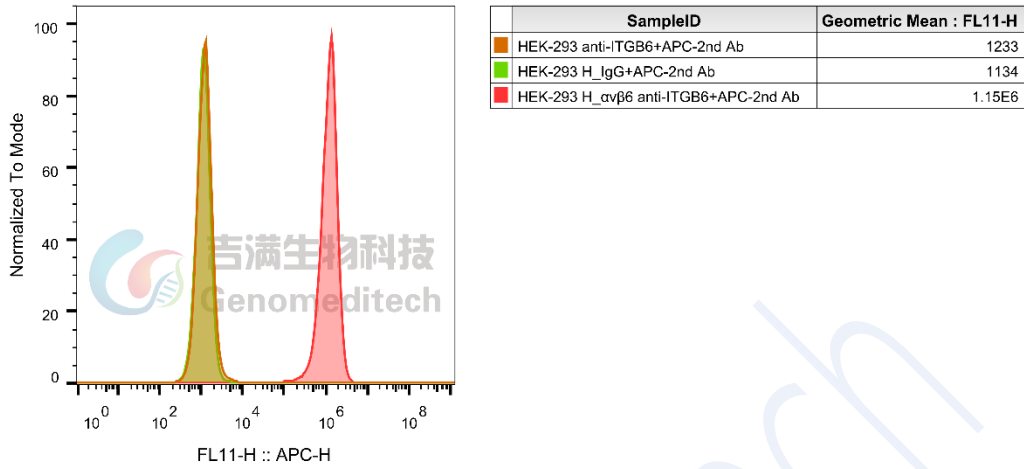


Fig 2. 使用 Anti-ITGB6-MMAE ADC(Dar4)[SGN-B6A] (Genomeditech/GM-81150AB) 流式验证结果

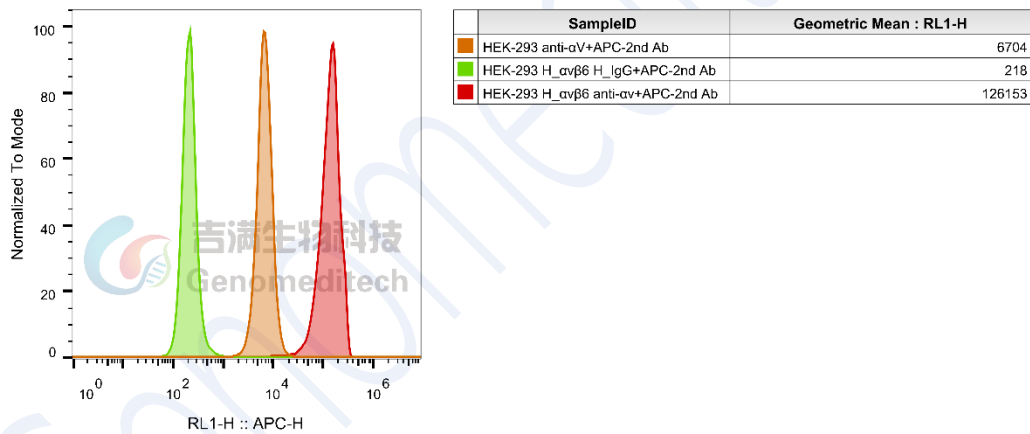


Fig 3. 使用 Anti-αV hIgG2 Antibody (Genomeditech/GM-49298AB) 流式验证结果

附录 2 H_ITGAV 氨基酸序列(NP_002201.2)

MAFPPRRRLRLGPRGLPLLLSGLLLPLCRAFNLVDVSPA EYSGPEGSYFGFAVDFFVPSAS
 SRMFLLVGAPKANTTQPGIVEGGQVLKCDWSSTRRCQPIEFDATGNRDYAKDDPLEFKS
 HQWFGASVRSKQDKILACAPLYHWRTEMKQEREPVGT CFLQDGTKTVEYAPCRSQDIDA
 DGQGFCQGGFSIDFTKADR VLLGGPGSFYWQGQLISDQVAEIVSKYDPNVYSIKYNNQLA
 TRTAQAIFFDDSYLGYSVAVGDFNGDGIDDFVSGV PRAARTLGMVYIYDGKNMSSLYNFT
 GEQMAAYFGFSVAATDINGDDYADVFIGAPLFMDRGS DGLQEVGQVSVSLQRASGDF
 QTTKLNGFEV FARFGSAIAPLGDL DQDGFNDIAIAAPYGGEDKKGIVYIFNGRSTGLNAVP

SQILEGQWAARSMPPSFGYSMKGATDIDKNGYPDLIVGAFGVDRILYRARPVITVNA
GL
EVYPSILNQDNKTCSLPGTALKVSCFNVRFLKADGKGVLPKLNQVVELLLDKLKQK
G
AIRRALFLYSRSPSHSKNMTISRGLMQCEELIAYLRDESEFRDKLTPITIFMEYRLDY
RTA
ADTTGLQPILNQFTPANISRQAHILLDCGEDNVCKPKLEVSVSDSQKKIYIGDDNPL
TLIVK
AQNQGEGAYEAELIVSIPLQADFIGVVRNNEALARLSCAFKTENQTRQVVC
DLGNPMKA
GTQLLAGLRFVHQSEMDSVKFDLQIQSSNLFDKVSPVVS
HKVDLAVLAAVEIRGVSS
PDHVFLPIPNWEHKENPETEEDVGPVQHIYELRNNGPSSFSKAMLHLQWPYKY
NNNTL
LYILHYDIDGPMNCTSDMEINPLRIKISSLQTTEKNDTVAGQGERDHLITKRDL
ALSEGDIH
TLGCGVAQCLKIVCQVGRDRGKSAILYVKSLLWTETFMNKENQNHSYSLKSSA
SFNVIE
FPYKNLPIEDITNSTLVTNTWGIQAPMPVPVWVILAVLAGLLLLAVLVFVMYR
MGFF
KRVPRPQEEQEREQLQPHENGEENSET

附录3 H_ITGB6 氨基酸序列(P18564-1)

MGIELLCLFFLFLGRNDHVQGGCALGGAETCEDCLLIGPQCAWCAQENFTHPSG
VGERC
DTPANLLAKGCQLNFIENPVSQVEILKNKPLSVGRQKNSSDIVQIAPQSLILKLR
PGGAQTL
QVHVRQTEDYPVDLYYLMDSLASMDDDLNTIKELGSRLSKEMSKLTSNFRLGFG
SFVEK
PVSPFVKTTPEEIANPCSSIPYFCLPTFGFKHILPLTND AERFNEIVKNQKISAN
IDTPEGGFD
AIMQAAVCKEKIGWRNDSLHLLVFSADADSHFGMDSKLAGIVIPNDGLCHLDSK
NEYSM
STVLEYPTIGQLIDKLVQNNVLLIFAVTQEQVHLYENYAKLIPGATVGLLQKDS
GNILQLII
SAYEELRSEVELEVLGDTEGLNLSFTAICNNGTLFQHQQKCSHMKVGD
TASFVTVNIPH
CERRSRHIIKPVGLGDALELLVSPECNDCQKEVEVNSSKCHHGNGSFQCGVC
ACHPGH
MGPRCEGEDMLSTDSCKEAPDHPSCSGRGDCYCGQCICHLSPYGNIGPYCQCD
NFSCV
RHKGLLCGGNGDCDCGECVCRSGWTGEYCNCTTSTDSCVSEDGVLCSGRGDCV
CGKCV
CTNPGASGPTCERCPTCGDPCNSKRSCIECHLSAAGQAREECVDKCKLAGATIS
EEEDFSK
DGSVCSLQGENECLITFLITDNEGKTIHSINEKDCPKPPNIPMIMLGVS
LAILLIGVVLLC
IWKLLVSFHDRKEVAKFEAERSKAKWQTGTNPLYRGSTSTFKNV
TYKHREKQKVDLSTD
C

相关产品

TGF-β:GARP:avβ6	
H_GARP Latent TGFB1 Reporter HEK-293 Cell Line	TGF-β Reporter 293 DDX35TM Cell Line
TGF-β Reporter HEK-293 Cell Line	Cynomolgus_αvβ6 HEK-293 Cell Line
H_GARP CHO-K1 Cell Line	H_GARP HEK-293 Cell Line
H_GARP Latent TGF-β1 CHO-K1 Cell Line	H_GARP Latent TGF-β1 HEK-293 Cell Line
H_ITGB6 CHO-K1 Cell Line	H_ITGB6 HEK-293 Cell Line
H_αvβ6 CT26 Cell Line	H_αvβ6 LLC1 Cell Line
H_αvβ6 MC38 Cell Line	Anti-ITGB6-MMAE ADC(Dar4)[SGN-B6A]
Anti-GARP-TGF-β1 hIgG4 Antibody(ARGX-115)	Anti-H_ITGB6 hIgG1 Reference Antibody (h2A2)
Anti-ITGB6 hIgG1 Antibody(SGN-B6A)	Anti-TGFB1 hIgG4 Antibody(SRK-181)
Anti-αv hIgG2 Antibody(Abituzumab)	Anti-αvβ6 hIgG1 Antibody(m15H3)
ADC Related Product	
Anti-DXD Mouse IgG1 Antibody (23E21C5)	Anti-DXD Mouse IgG1 Antibody (4A5A12)
Anti-Dxd Mouse IgG2a Antibody (17D6A4)	Anti-Eribulin Mouse IgG2a Antibody (10F8G4)
Anti-MMAE Mouse IgG1 Antibody (11C10E3)	Anti-MMAE Mouse IgG2a Antibody (17A1K11)
Anti-MMAE Mouse IgG2a Antibody (8F6A3)	Mouse anti Human IgG-MMAE(Dar4)
Human IgG1 Isotype-DXD (Dar8)	Human IgG1 Isotype-Eribulin (Dar4)
Human IgG1 Isotype-MMAE (Dar4)	Recombinant DT3C Protein

使用许可协议:

吉满生物将其许可材料的所有知识产权，独占的、不可转让的和不可发放分许可的权利授予给被许可人；吉满生物将保留许可材料、细胞系历史包、子代、包括修改材料中许可材料的所有权。

在吉满生物和被许可方之间，被许可方不允许以任何方式修改细胞系。被许可方不得分享、分发、出售、再授权或以其他方式将被许可材料、子代提供给其它实验室、部门、研究机构、医院、大学或生物技术公司等第三方非基于外包被许可人的研究目的而使用。

详情请参考吉满细胞系授权协议。